



W H A L T I M A



MASAŻER NÓG I STÓP

MODEL: BORA-BORA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Należy szczególnie uważnie przeczytać ze zrozumieniem opis środków ostrożności niezbędny do prawidłowego użytkowania urządzenia. Niniejszą INSTRUKCJĘ OBSŁUGI należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w celu korzystania z niej w przyszłości.







SPIS TREŚCI

| | |
|---|---|
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI..... | 1 |
| NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI..... | 3 |
| Struktura zewnętrzna..... | 3 |
| Panel sterowania..... | 4 |
| Funkcje panelu sterowania..... | 5 |
| INSTRUKCJA OBSŁUGI..... | 5 |
| Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania..... | 6 |
| Po użyciu..... | 6 |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..... | 7 |
| Konserwacja..... | 7 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... | 8 |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA..... | 8 |

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ▶ Przed użyciem należy uważnie przeczytać sekcję "OSTRZEŻENIE", aby zapewnić prawidłowe działanie.
- ▶ Poniższe "Środki ostrożności" pomogą użytkować urządzenie w prawidłowy sposób.
- ▶ W celu wyraźnego wskazania stopnia zagrożenia i szkód, przykładowe wypadki zostały sklasyfikowane jako "OSTRZEŻENIE" i "UWAGA", należy ściśle przestrzegać instrukcji oznaczonych w następujący sposób:

| | |
|---|--|
|  OSTRZEŻENIE | Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia jego użytkowników. |
|  UWAGA | Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia jego użytkowników lub uszkodzenie urządzenia. |
|  |  Zabronione. Symbol po lewej stronie oznacza, że samodzielny demontaż jest niedozwolony. |
|  |  Obowiązkowe. Symbol po lewej stronie oznacza, że przewód zasilający musi być koniecznie odłączony po użyciu. |

OSTRZEŻENIE

Urządzenie wymaga starannego nadzoru podczas użytkowania przez dzieci, osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, a także podczas użytkowania w pobliżu wskazanych osób.

| | |
|---|---|
|  UPEWNIJ SIĘ | Przed rozpoczęciem użytkowania, zaleca się konsultację z lekarzem szczególnie w przypadku: 1. osób, które mają wszczepione rozruszniki serca lub urządzenia elektroniczne (implanty), 2. osób poddawanych leczeniu, zwłaszcza tym, których samopoczucie nie jest dobre, 3. osób z nowotworami złośliwymi, ropniami złośliwymi, chorobami serca lub wysokim ciśnieniem krwi, 4. osób z chorobami skóry lub ze zmianami skórnymi, 5. kobiet w ciąży oraz w okresie menstruacji, 6. osób cierpiących na osteoporozę i/lub osób, u których doszło do złamania kręgosłupa, 7. osób z wysoką gorączką. |
|  ZABRONI- NE | Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną powinny użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem. |
| | Nie zezwalaj dzieciom na samodzielne użytkowanie lub zabawę urządzeniem. |
| | Z urządzenia nie może korzystać więcej niż jedna osoba w tym samym czasie. |
| | Nie wolno uszkadzać, chwytać, nadmiernie zginać, mocno ciągnąć, skręcać ani wiązać przewodu zasilającego. |
| | Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. |
|  NIE DEMONTOWAĆ | Nie należy umieszczać palców, włosów ani innych części ciała w pobliżu dyszy, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia produktu. |
| | Nikt poza personelem serwisowym wskazanym przez naszą firmę nie powinien demontować, konserwować ani rekonstruować tego produktu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. |

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE

| | |
|--|---|
|  UPEWNIJ SIĘ | Nie należy używać produktu w sposób ciągły przez dłużej niż 15 minut. |
| | Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. |
| | Domyślny czas pracy urządzenia wynosi 15 minut. |
| | Nie należy przykrywać urządzenia kocem lub poduszką podczas jego użytkowania, aby zapobiec poparzeniu użytkownika i spowodowaniu pożaru przez zapłon urządzenia. |
| | Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy wchodzić na urządzenie. |
| | Nie dotykaj panelu sterowania mokrymi rękami. |
| | Nie należy pozostawiać urządzenia na zewnątrz. |
| | Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub innych płynach podczas czyszczenia. |
| | Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z pomieszczenia o niskiej temperaturze do cieplejszego miejsca, zaleca się uruchomienie go po upływie 1 godziny, aby uniknąć nieprawidłowego działania spowodowanego kondensacją pary. |
| | Nie należy używać tego urządzenia w połączeniu z innymi urządzeniami terapeutycznymi. |
| | Jeśli urządzenie użytkowane jest przez osoby niewrażliwe na wysokie temperatury, za każdym razem musi to nadzorować osoba wrażliwa na temperaturę. |
| | Nie wolno używać tego urządzenia do celów medycznych. |
| | Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych sytuacji (np. pojawienia się dymu lub specyficznego zapachu) podczas użytkowania. |
| | Należy używać wyłącznie zasilacza o napięciu znamionowym. |

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je sprawdzić, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń niezwłocznie zlecić naprawę sprzedawcy.

Nie korzystaj z tego urządzenia w wilgotnym środowisku, aby uniknąć porażenia prądem.

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpią jakiegokolwiek problemy, należy natychmiast przerwać użytkowanie, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Po użyciu należy wyłączyć zasilanie.

Nie należy skorzystać z urządzenia po upływie czasu krótszego niż pół godziny po spożyciu posiłku.

Nie wolno spać podczas użytkowania urządzenia.

Nie należy korzystać z urządzenia po spożyciu alkoholu lub w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dolegliwości.

Do czyszczenia nie należy używać benzyny, środków żrących ani pestycydów w sprayu.

Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.



Nie wolno palić tytoniu podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć ryzyka pożaru.



ZABRONIONE

NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI

Struktura zewnętrzna

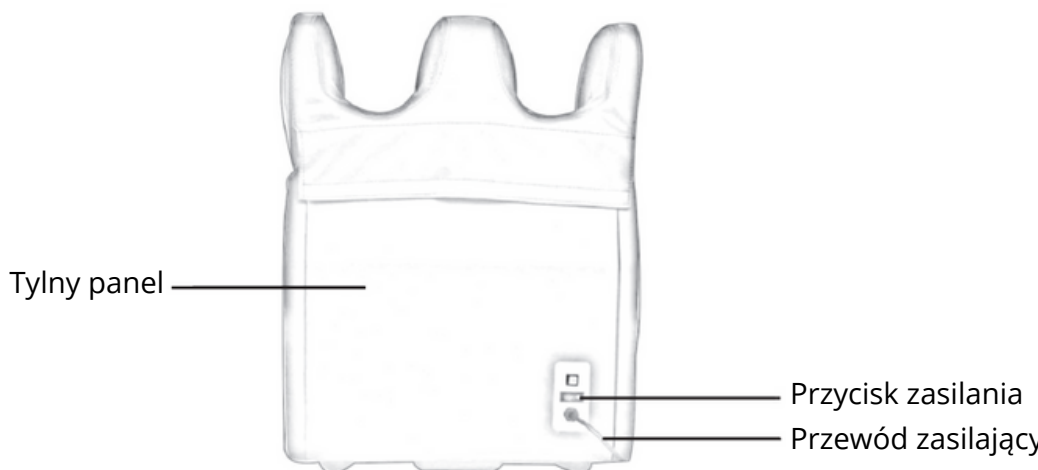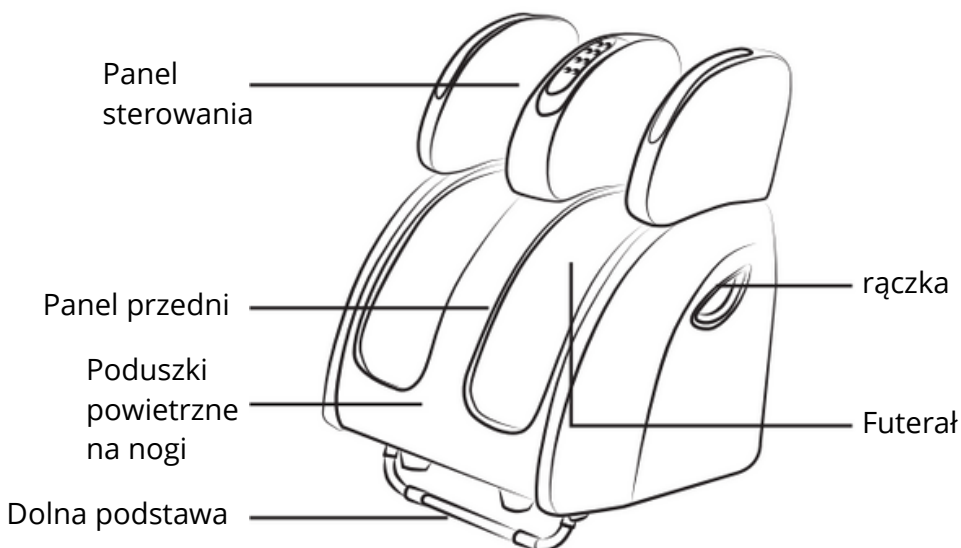

NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI

Panel sterowania

Począwszy od poziomu intensywności 2, który można zmienić na poziom 1 lub 3.

Wybór programu masażu stóp

Wybór programu masażu dla łydek, kolan i ud

Program automasażu



Funkcja podgrzewania

Funkcja wibracji

Rolki zaprojektowane specjalnie do masażu podeszwy stopy

Włącznik zasilania

INTENSYWNOŚĆ



**OSTRZE-
ŻENIE**

- ▶ Nie należy przyskać wodą ani innymi płynami na panel sterowania.
- ▶ Nie naciskać przycisku zbyt długo, aby nie pomylić programu.
- ▶ Nie używaj urządzenia w pozycji stojącej i nie kładź na nim żadnych ciężkich przedmiotów.
- ▶ Nie stawaj ani nie siadaj na urządzeniu.
- ▶ Podczas transportu urządzenia nie ciągnąć za przewód zasilający. Nie ciągnąć urządzenia bezpośrednio, aby uniknąć jego uszkodzenia.

NAZWA I PRZEZNACZENIE KAŻDEJ CZĘŚCI

FUNKCJE PANELU STEROWANIA

Intensity (Intensywność):

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać między ustawieniami średniej, wysokiej i niskiej intensywności.

Przycisk ogrzewania (Heat):

Jeśli masażer jest uruchomiony, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania.

Tryb automatycznego masażu stóp (Stopa):

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb automatycznego masażu stóp.

Vibration (Wibracje):

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję wibracji.

Tryb automatycznego masażu nóg (Leg):

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć tryb automatycznego masażu łydek, kolan i bioder.

Włączanie/wyłączanie zasilania:

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

Rolki masujące (Roller):

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć rolki masujące.

Tryb automatycznego łączenia (Auto):

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego łączenia (bez wibracji lub ogrzewania).

Intensywność:

Niska, Średnia, Wysoka

Uwaga:

Średnia intensywność jest ustawieniem domyślnym, naciśnij przycisk intensywności, aby przełączać między 3 ustawieniami. Wybierz intensywność zgodnie z własnymi preferencjami.



**OSTRZE-
ŻENIE**

- ▶ Jeśli podczas masażu wystąpi awaria zasilania, należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Nie zbliżać rąk ani palców do urządzenia lub przestrzeni na stopy podczas pracy urządzenia, aby uniknąć obrażeń.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się urządzeniem, aby uniknąć wypadków.

Zdejmowanie górnego pokrowca materiałowego:

1. Rozpakuj i zdejmij materiałowy pokrowiec.
2. Wyczyść pokrowiec.
3. Załóż górny pokrowiec

(należy pamiętać, że lewa część pokrowca materiałowego jest inna od prawej).

Zdejmowanie dolnego pokrowca materiałowego:


1. Zdejmij pokrowiec za pomocą zewnętrznych pasków z rzepami.

2. Rozepnij zamek błyskawiczny pokrowca.
3. Zdejmij pokrowiec materiałowy.


Montaż dolnego pokrowca materiałowego:

1. Połącz wewnętrzne paski rzepami.
2. Zapnij zamek błyskawiczny.
3. Połącz zewnętrzne paski rzepami.

Zamek błyskawiczny

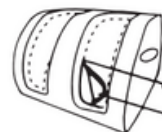

Zamek błyskawiczny
Wewnętrzny pasek na rzepy

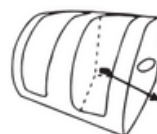

Zewnętrzny pasek na rzepy

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Uruchamianie masażera:

- ▶ Masażer należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.
- ▶ Zalecamy umieszczenie pod spodem dywanika lub miękkiej maty w celu zmniejszenia hałasu podczas użytkowania.

Podłączanie zasilania:

- ▶ Podłącz przewód zasilający do urządzenia następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
- ▶ Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- ▶ Przed rozpoczęciem pracy należy odwrócić dolny wspornik.
- ▶ Po przełączeniu przełącznika zasilania znajdującego się na tylnej krawędzi pokrywy, zaświeci się kontrolka zasilania, urządzenie zostanie włączone, a wskaźnik na panelu sterowania zacznie migać.
- ▶ Naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania, aby rozpocząć działanie urządzenia.
- ▶ Wybierz żądany program, aby rozpocząć masaż.

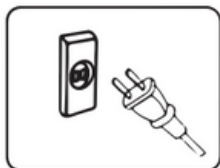

**OSTRZE-
ŻENIE**

- ▶ Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- ▶ Nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.



Schemat masażera 1



Schemat masażera 2

PO UŻYCIU

- ▶ Wyłącz przycisk zasilania na panelu sterowania.
- ▶ Wymij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

KONSERWACJA.

CZYSZCZENIE

- ▶ Przed czyszczeniem należy upewnić się, że przewód nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- ▶ Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać miękkiej ściereczki.



OSTRZEŻENIE

- ▶ Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki od gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
- ▶ Nie używaj spryskiwaczy ani nie spryskuj wnętrza urządzenia wodą lub innymi płynami.
- ▶ Nie używaj agresywnych środków czyszczących, takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do czyszczenia urządzenia, w przeciwnym razie kolor obudowy wyblaknie, urządzenie pęknie lub wyblaknie.
- ▶ Nie prasuj tapicerki.
- ▶ Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, nie zdejmuj pokrowca z tkaniny, lecz pozwól mu wyschnąć w naturalny sposób.

KONSERWACJA

- ▶ Upewnij się, że przewód nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- ▶ Wytrzyj kurz. Urządzenie utrzymuj w czystości i trzymaj z dala od wilgotnych miejsc.
- ▶ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przykryj je osłoną przeciwpylową (dostarczaną oddzielnie).



OSTRZEŻENIE

- ▶ Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach o dużym nasłonecznieniu lub w miejscach o wysokiej temperaturze. Może to spowodować wyblaknięcie koloru obudowy.

UWSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Podczas codziennego korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy nie występują następujące oznaki uszkodzenia:

- ▶ Zapach spalenizny
- ▶ Gdy przewód jest dotykany, czasami zasilanie jest włączone, a czasami wyłączone.
- ▶ Przewód zasilający jest gorący
- ▶ inne nietypowe objawy.



OSTRZEŻENIE

- ▶ Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i możliwych wypadków.
- ▶ Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub z nami.
- ▶ Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Nr | Objawy usterki | Możliwe przyczyny | Możliwe rozwiązania |
|----|--|---|--|
| 1 | Niepowodzone uruchomienia | Kabel nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego | Ponownie podłącz wtyczkę |
| | | Wyłącznik zasilania wyłączył się | Włącz przełącznik |
| 2 | Masażer nie uruchamia się, a wskaźnik zasilania jest wyłączony | Bezpiecznik jest przepalony | Włóż wykałaczkę lub podobny przedmiot do małego otworu oznaczonego "FUSE" (bezpiecznik) nad wyłącznikiem zasilania w dolnej części tylnego panelu, wyjmij bezpiecznik i wymień go na nowy. |
| 3 | Podczas użytkowania słychać hałas | Urządzenie działało zbyt długo | Wyłącz zasilanie i odczekaj godzinę |
| 4 | Panel zewnętrzny jest gorący | Urządzenie działało zbyt długo | Wyłącz masażer i odczekaj pół godziny. |

Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów pojawią się jakiegokolwiek nieprawidłowe wskazania, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy autoryzowanego inżyniera serwisu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry techniczne:

Nazwa urządzenia: Masażer do stóp i nóg

Marka: WHALTIMA

Model: Bora-Bora

Napięcie znamionowe: 220-240 V ~

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 40 W

Producent: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Lokalizacja: Chiny, nr 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Szanghaj

Aby znaleźć datę produkcji urządzenia, należy sprawdzić numer seryjny znajdujący się na etykiecie identyfikacyjnej na obudowie urządzenia. Numer seryjny składa się z 10 znaków. Siódmy i ósmy znak oznaczają miesiąc, a dziewiąty i dziesiąty znak oznaczają rok produkcji urządzenia.

PRODUCENT MA PRAWO DO ZMIANY PROJEKTU, WYPOSAŻENIA I WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA W CELU USPRAWNIENIA JEGO PRODUKCJI.

ZMIANY W ASPEKTACH TECHNICZNYCH SĄ TRWAŁE.



W H A L T I M A