



W H A L T I M A



MASAJEADOR DE MANO

MODELO: TONGA
MANUAL DE INSTRUCCIONES



2023

Los avances de la ciencia y la tecnología han cambiado definitivamente nuestras vidas, y cuidar la salud se ha convertido en un movimiento activo y no sólo en palabras vacías.

TONGA es un mini masajeador inalámbrico con un diseño minimalista, elegante y sencillo. Es extremadamente ligero y portátil, por lo que puede llevarlo a todas partes. Utiliza una moderna tecnología de motor de bola de alta frecuencia sin escobillas, gracias a la cual proporciona un masaje profundo que alivia eficazmente los dolores musculares causados por estar sentado durante mucho tiempo o por un entrenamiento intenso. El masajeador es silencioso y fácil de cargar. Cuenta con 30 niveles de intensidad y una batería recargable incorporada que permite su uso sin cables. El TONGA es la herramienta de masaje que se convertirá en su masajeador personal después de un entrenamiento.

Gracias por adquirir este producto. Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizarlo para garantizar una instalación y un uso correctos. Conserve este manual como guía para futuras consultas.







ÍNDICE

Precauciones	1
Nombre y función de cada componente	4
Estructura	4
Consejos de masaje	4
Botón de control	5
Instrucciones de uso del botón de control	5
Montaje de la punta masajeadora	6
Instrucciones de uso	7
Initial control	7
Instrucciones de uso	7
Después del uso	8
Almacenamiento y cuidado del aparato	8
Instrucciones de cuidado	8
Consejos de utilización	8
Detección de fallos	9
Especificaciones técnicas	9

PRECAUCIONES


Precauciones

- ▶ Antes de utilizarlo, lea atentamente todas las precauciones para garantizar el funcionamiento correcto de este aparato.
- ▶ Las siguientes precauciones y advertencias le ayudarán a garantizar el correcto funcionamiento de este aparato.
- ▶ Los tipos de accidentes causados por un mal uso están divididas en las secciones PRECAUCIÓN y ADVERTENCIA. Lea todas las secciones de PRECAUCIÓN y ADVERTENCIA que aparecen a continuación y siga todas las instrucciones en este documento.

 ADVERTENCIA	Un manejo inadecuado puede provocar lesiones al usuario.
 PRECAUCIÓN	El uso inadecuado puede provocar lesiones a los usuarios o daños en el aparato.
	 Prohibido. El símbolo de la izquierda indica, que el desmontaje por parte del usuario no está permitido.
	 Necesario. El símbolo de la izquierda indica la necesidad de desconectar el cable de alimentación.

PRECAUCIÓN

Debe prestarse especial atención al uso del aparato por parte de niños, personas discapacitadas o con movilidad reducida, así como al utilizar el aparato en las proximidades de dichas personas.

 CAUIDADO	<p>Se debe tener especial cuidado y vigilar el uso del aparato por parte de niños, personas discapacitadas o con movilidad reducida, y cuando se utilice el aparato cerca de dichas personas. Si padece alguna de las siguientes afecciones se recomienda consultar a un médico antes de utilizar el aparato:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personas con marcapasos o implantes electrónicos.2. Personas sometidas a tratamiento médico, especialmente las que se sientan indispuestas.3. Personas con tumores malignos, abscesos malignos, cardiopatías o hipertensión.4. Personas con lesiones o enfermedades cutáneas.5. Mujeres embarazadas y durante la menstruación.6. Personas con osteoporosis o fractura vertebral.7. Personas con fiebre alta.
--	---

PRECAUCIONES



PROHIBIDO

El uso del aparato por niños, personas con discapacidad o personas con movilidad reducida, así como cuando se utilice el aparato en las proximidades de dichas personas.

No permita que los niños utilicen o jueguen con este aparato.

Utilizar un masajeador alrededor de la cabeza, el cuello o el corazón puede ser mortal.

Bajo supervisión médica, se puede utilizar el masajeador para masajear el cuello o la parte inferior de la columna vertebral.

Si el cable de alimentación está dañado, desconecte inmediatamente la alimentación y no utilice el aparato.

Para evitar fallos de funcionamiento, asegúrese de que el aparato no esté expuesto al agua u otros líquidos. Si cae en el agua o se moja, no lo utilice, no intente desmontarlo ni repararlo usted mismo, envíelo a un servicio técnico autorizado.

Para evitar lesiones a los usuarios o daños al aparato, no ponga los dedos, el pelo u otras partes del cuerpo alrededor de la punta del masajeador.



NO DESMONTAR

No intente reparar o desmontar la unidad usted mismo. Póngase en contacto con un distribuidor o servicio técnico oficial.



PROHIBIDO

No utilice el dispositivo justo después de una comida, ya que puede causar molestias.

Evite utilizar el aparato bajo los efectos del alcohol.

No utilice este aparato durante tormentas o relámpagos.

No utilice gas, acetona o amilo (extracto de plátano) para limpiar el aparato, ni utilice insecticidas sobre él.

No utilice el aparato a temperaturas superiores a 40°C y manténgalo alejado de superficies calientes para evitar incendios o daños en el aparato.

A temperaturas inferiores a 5°C, los materiales lubricantes se vuelven rígidos y aumentan la fricción.

No cargue el aparato a temperaturas inferiores a 0°C para evitar sobrecargar la batería y acortar su vida útil.


No fume mientras utiliza este aparato para evitar incendios.

No utilice este dispositivo en zonas íntimas del cuerpo.

PRECAUCIONES




¡CUIDADO!

 CUIDADO	<p>Se recomienda utilizar este producto de forma continua durante 10 minutos</p>
	<p>No coloque objetos pesados sobre el aparato y no toque los botones de control con las manos mojadas.</p>
	<p>No utilizar directamente en zonas próximas a los huesos, el uso intensivo puede provocar la aparición de hematomas. Por favor, elija el nivel de intensidad adecuado.</p>
	<p>No cubra el aparato con alfombras, sábanas, almohadas o cojines durante su uso para evitar lesiones causadas por sobrecalentamiento o incendio.</p>
	<p>No tape la abertura de ventilación con ningún objeto para evitar el sobrecalentamiento de los componentes internos.</p>
	<p>No sumerja el aparato en agua ni en ningún tipo de disolvente para intentar limpiarlo.</p>
	<p>Utilice el adaptador original y en caso de sustitución, póngase en contacto con su proveedor o con un especialista cualificado.</p>
	<p>Si el producto se traslada de un lugar a baja temperatura a un lugar cálido, espere una hora hasta que la condensación se detenga y, a continuación, limpie el aparato para evitar posibles daños.</p>
	<p>No mezcle pilas de distintos tipos, ya que podría dañar el aparato, provocar fugas de la pila o incendio.</p>
	<p>No deje caer el dispositivo sobre una superficie dura ni lo utilice de forma inadecuada.</p>
	<p>Utilice el aparato únicamente para los fines previstos, tal y como se describe en el manual de instrucciones. No utilice otros dispositivos terapéuticos junto con este producto.</p>
	<p>Retire el enchufe de la toma de corriente en caso de corte del suministro eléctrico y desconecte todos los mandos.</p>
	<p>Si observa cualquier síntoma anormal o mal funcionamiento mientras la unidad está en funcionamiento, desconecte inmediatamente la alimentación y deje de utilizarlo.</p>
	<p>Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un centro de servicio autorizado o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.</p>
	<p>No utilizar en ambientes húmedos para evitar fugas de corriente.</p>
	<p>Si experimenta alguna molestia particular mientras utiliza este aparato, apáguelo inmediatamente y deje de utilizarlo.</p>
<p>Después de su uso, retire la punta de masaje y coloque el aparato en un lugar seguro.</p>	

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES

DISEÑO

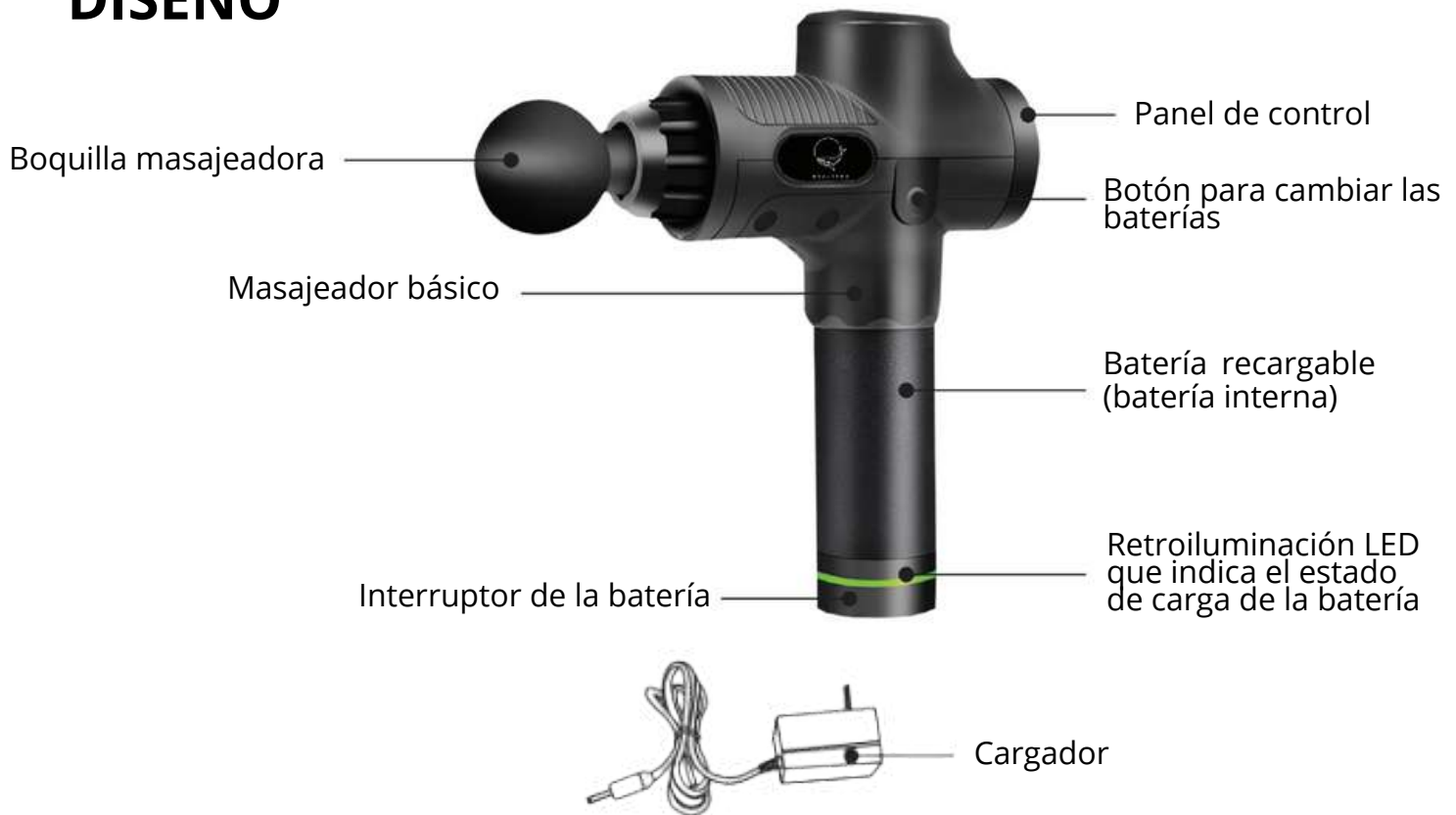

Accesorios de masaje



Punta Redonda
utilizada para masajear grupos musculares más grandes



La punta en forma de horquilla
se aplica a la columna vertebral



Punta en forma de tapón
adecuada para masajear todas las partes del cuerpo, incluida la columna vertebral



Punta en forma de mano
adecuada para masajear el abdomen y la cintura



Punta esférica adecuada
para el masaje articular y la penetración profunda en los tejidos



La punta plana
se utiliza para las extremidades y los brazos



ADVERTENCIA

- ▶ No coloque objetos pesados sobre el producto.
- ▶ No ponga los pies sobre el producto.
- ▶ Después del uso, apague el aparato y llévalo a un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES

Panel de control



Manual del usuario:

1. Asegúrese de que la batería está cargada. Conecte la batería al dispositivo y fíjela.
2. Acopla la punta seleccionada al dispositivo.
3. Deslice el interruptor de la parte inferior de la batería a la posición ON para encender el aparato.
4. A continuación, pulse el botón START/STOP del panel de control para activar el primer nivel de funcionamiento del aparato. Pulsando sucesivamente los botones "+" o "-", puede cambiar los niveles de funcionamiento de 1 a 30, y el nivel correspondiente se mostrará en la parte izquierda de la pantalla.
5. Para apagar el aparato, en la parte inferior de la batería, deslice el interruptor a la posición OFF.

Recomendaciones:

No utilice el aparato durante más de 60 segundos por parte del cuerpo manipulada. No utilice el aparato durante más de media hora. A continuación, haga una pausa para que el aparato no se sobrecaliente.

Cargando:

1. Se necesitan hasta 4 horas para cargar completamente la batería.
2. Conecte la fuente de alimentación a la batería y conéctela a la red de 220 V.
3. La pantalla mostrará el nivel de carga actual de la batería.
4. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador luminoso dejará de parpadear.
5. La batería puede cargarse con cualquier nivel de carga restante.
6. No se recomienda descargar completamente la batería cuando el indicador luminoso muestre una luz roja.

NOMBRES Y FUNCIONES DE TODOS LOS COMPONENTES



ADVERTENCIA

- ▶ No pulse el botón de encendido sin parar. Espere 3 segundos antes de encender el aparato.
- ▶ No introduzca nunca las manos en las partes abiertas de este producto durante su uso para evitar lesiones.
- ▶ Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados de este aparato.
- ▶ No derrame agua ni otros líquidos sobre el panel de control.

MÉTODO DE INSTALACIÓN



- ▶ Coloque la batería en la abertura del aparato. Asegúrese de que está firmemente fijado hasta que oiga un clic. Para asegurarse de que el bloque está firmemente fijado, tire de él hacia abajo
- ▶ Para colocar el cabezal de masaje, apague el aparato, alinee la parte convexa del cabezal con la abertura del aparato de masaje manual, introdúzcalo lentamente y asegúrese de que todo queda bien encajado.



ADVERTENCIA

- ▶ Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que la batería y el cabezal de masaje están correctamente insertados y fijados.
- ▶ Para extraer la batería, presione y tire del botón de sustitución del bloque de la batería.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSPECCIÓN INICIAL

- ▶ Compruebe bien el aparato antes de utilizarlo.
- ▶ Antes del primer uso, asegúrese de que la batería está completamente cargada. Para ello, coloque el dispositivo en el cargador durante 6 horas. Puede cargar la batería mientras está conectada al aparato de dispositivo de masaje o cuando esté desconectado de él.
- ▶ La batería está equipada con un indicador luminoso. Cuando la alimentación de la batería está activada pero el aparato no está en funcionamiento, el indicador se ilumina en blanco. Cuando el aparato está encendido, el indicador se ilumina en verde. Si el indicador de la batería se vuelve rojo, significa que el nivel de carga de la batería ha caído por debajo del 20%. Esto indica al aparato que necesita ser recargado. Si aparece el mensaje "E1", significa que la batería está descargada y le recuerda que debe recargarlo. Si no aparece ninguna información en la pantalla cuando está encendida, significa que la batería está defectuosa. Debe ponerse en contacto con un centro de servicio.



ADVERTENCIA

- ▶ Este masajeador no se pone en marcha y no funciona durante la carga.
- ▶ El producto está equipado con funciones de seguridad que evitan el sobrecalentamiento y la excesiva carga. La batería tiene un límite de carga para protegerla mejor.
- ▶ Mantén la carga de la batería por encima del 50% para mejorar su salud.
- ▶ Antes de enchufarlo a una toma de corriente, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado.
- ▶ El indicador parpadea durante la carga y deja de parpadear cuando la batería está completamente cargada.



ADVERTENCIA

- ▶ Cuando utilice el aparato, no se lo acerque a la cara.



ADVERTENCIA

- ▶ Este aparato está equipado con protección contra sobrecalentamiento. El uso continuo puede provocar la activación de esta protección, lo que conduce a un apagado automático de la fuente de alimentación para evitar el sobrecalentamiento.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO DEL DISPOSITIVO

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL APARATO

LIMPIEZA

- ▶ Antes de limpiarlo, asegúrese de que el cable no está enchufado a una toma de corriente.
- ▶ Utilice un paño suave para limpiar la superficie del producto.
- ▶ Para quitar las manchas, limpie con un paño suave y húmedo o con una esponja suave, y luego limpie con un paño seco.



ADVERTENCIA

- ▶ No conecte ni desconecte nunca el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas.
- ▶ No enjuague nunca el aparato con agua ni vierta agua u otros líquidos sobre él.
- ▶ Evite el contacto con gasolina, disolventes y otras sustancias que puedan causar daños al producto.

ATENCIÓN Y APOYO

- ▶ No almacenar en un ambiente húmedo, cerca de fuentes de alta temperatura o donde haya gases volátiles.
- ▶ Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda extraer la batería, cargarla completamente y colocar el producto en la caja para evitar que se llene de polvo. Si el producto no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, recomendamos cargar la batería cada mes para evitar daños.



ADVERTENCIA

- ▶ No deje el aparato expuesto a la luz solar directa durante un periodo de tiempo prolongado. Esto puede provocar daños en el dispositivo.

INSTRUCCIONES DE USO

Durante el uso diario, compruebe si el aparato presenta los siguientes signos:

- ▶ Humo u olor a quemado,
- ▶ El botón "Power" parpadea al pulsarlo,
- ▶ El cable de alimentación está caliente,
- ▶ Otros signos inusuales.



¡NOTA!

- ▶ Por favor, interrumpa el uso si se producen los signos anteriores con el fin de evitar daños en el aparato y posibles accidentes.
- ▶ Apague el botón de encendido y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre la reparación.
- ▶ No intente reparar o desmontar el producto usted mismo.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO DEL DISPOSITIVO

Nº	Señales	Posibles causas	Posibles soluciones
1	Se oye ruido durante el uso.	Esto es normal y se debe al uso de piezas mecánicas.	No se requiere ninguna acción.
		La parte interior está agrietada.	Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
2	El aparato no se enciende.	Batería baja.	Por favor, recargue la batería y reinicie el dispositivo.
		El aparato está sobrecargado y el mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento ha interrumpido el suministro de corriente.	Pulse el botón "Encendido" para reiniciar el aparato.
		El botón "Power" está apagado.	Pulse el botón "Encendido".
3	El masajeador deja de funcionar durante su uso.	Batería baja.	Por favor, recargue la batería y reinicie el dispositivo.
4	La retroiluminación LED que indica el nivel de batería está apagada.	Compruebe que el interruptor de la batería está en la posición "ON".	Encienda el botón de encendido de la batería.
		Si la batería ha estado apagada durante mucho tiempo, se recomienda recargarla antes de usarla.	Si la batería ha estado apagada durante mucho tiempo, intenta cargarla durante al menos 8 horas.
5	Apareció humo o un olor desagradable durante el uso.	El aparato está averiado.	Deje de utilizar el aparato inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
6	La duración de la batería es corta. El dispositivo no se carga.	La batería está agotada.	Por favor, sustituya la batería por una nueva / Solicite la sustitución de la unidad por una nueva.

Si no puede resolver el problema usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencia técnica.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características funcionales:

Pantalla LCD con panel táctil

Control de velocidad

Hasta 3200 carreras por minuto

Parámetros técnicos:

Tensión nominal de entrada/salida 220V / 16,8V

Frecuencia: 50 Hz

Capacidad de la batería: 2500 mAh, 16,8V, 15A

Tiempo óptimo de carga de la batería: 4 horas

Tiempo óptimo de uso: 30 minutos

Peso neto: 1,1 kg

Fabricante: Liancheng County Lu Xiaoyi Departmentstore

Dirección de fabricación No. 146, Mali West New Village, Guanhu Street, Guanlan, Shenzhen, China

Fabricado en China

Para conocer la fecha de fabricación del aparato, compruebe el número de serie que se encuentra en la etiqueta de identificación de la carcasa del producto. El número de serie consta de 10 caracteres. Los caracteres 7. y 8. representan el mes, y los caracteres 9. y 10. representan el año de fabricación del aparato.

EL FABRICANTE TIENE DERECHO A MODIFICAR EL DISEÑO, EL EQUIPAMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL APARATO CON EL FIN DE MEJORAR SU PRODUCCIÓN.

LOS CAMBIOS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS SON CONSTANTES.



W H A L T I M A