



W H A L T I M A



# MASAŽER ZA NOGE

**MODEL: BORA-BORA**

UPUTSTVO ZA KORISNIKE



Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj PRIRUČNIK ZA UPORABU.

Posebno pažljivo pročitajte i razumite opis mjera opreza potrebnih za ispravnu uporabu uređaja.

Ovaj PRIRUČNIK ZA UPOTREBU treba čuvati na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.







## SADRŽAJ

Mjere Opreza .....	1
Naziv I Namjena Svakog Dijela .....	3
Vanjska struktura .....	3
Kontrolna ploca .....	4
Značajke kontrolne ploče .....	5
Korisnički Priručnik .....	5
Priprema prije upotrebe .....	6
Nakon upotrebe .....	6
Čišćenje I održavanje .....	7
Održavanje .....	7
Rješavanje problema .....	8
Tehničke specifikacije .....	8

# MJERE OPREZA




## TMJERE OPREZA

- ▶ Prije uporabe pažljivo pročitatite odjeljak "UPOZORENJE" kako biste osigurali ispravan rad.
- ▶ Sljedeće "Mjere opreza" pomoći će vam da pravilno koristite uređaj.
- ▶ Kako bi se jasno ukazalo na stupanj opasnosti i štete, primjeri nesreća klasificirani su kao "UPOZORENJE" i "OPREZ", molimo vas da se strogo pridržavate uputa označenih na sljedeći način:

 <b>UPOZORENJE</b>	Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede korisnika.
 <b>PAŽNJA</b>	Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede korisnika ili oštećenja uređaja.
	 Zabranjeno. Simbol na lijevoj strani znači da nije dopušteno samostalno rastavljanje.
	 Obavezno. Simbol na lijevoj strani znači da se kabel za napajanje mora isključiti iz utičnice nakon upotrebe.

## UPOZORENJE


Uređaj zahtijeva pažljiv nadzor kada ga koriste djeca, osobe s tjelesnim ili mentalnim nedostatkom, kao i kada se koristi u blizini indiciranih osoba.

 <b>UVJERITE SE DA</b>	Prije uporabe preporuča se konzultirati liječnika, osobito u slučaju: <ol style="list-style-type: none"><li>1. osobe koje imaju ugrađene srčane stimulatore ili elektroničke uređaje (implantate),</li><li>2. osobe koje su podvrgnute liječenju, posebno one čije je stanje loše,</li><li>3. osobe sa zloćudnim tumorima, malignim apscesima, bolestima srca ili visokim krvnim tlakom,</li><li>4. osobe s kožnim bolestima ili kožnim lezijama,</li><li>5. trudnice i žene u menstruaciji,</li><li>6. osobe koje boluju od osteoporozе i/ili osobe koje su imale prijelom kralježnice,</li><li>7. osobe s visokom temperaturom.</li></ol>
 <b>ZABRANJENO</b>	Djeca s intelektualnim teškoćama trebaju koristiti uređaj samo pod nadzorom.
	Ne dopustite djeci da sama koriste ili se igraju s uređajem.
	Uređaj ne smije koristiti više od jedne osobe u isto vrijeme.
	Nemojte oštećivati, hvatati, pretjerano savijati, snažno povlačiti, uvrutati ili vezati kabel za napajanje.
	Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.
	Držite prste, kosu ili druge dijelove tijela dalje od mlaznice kako biste izbjegli ozljede korisnika ili oštećenje proizvoda.
 <b>NEMOJTE RASTAVLJATI</b>	Nitko osim ovlaštenog servisnog osoblja naše tvrtke ne smije rastavljati, održavati ili popravljati ovaj proizvod. U slučaju problema, odmah se obratite svom lokalnom prodavaču.

# TEŽAVANJE RIZIKA



## UPOZORENJE

 <b>BUDI SIGURAN</b>	Ne koristite uređaj neprekidno duže od 15 minuta.
	Ne stavljajte teške predmete na uređaj.
	Zadano vrijeme rada uređaja je 15 minuta.
	Ne pokrivajte uređaj dekom ili jastukom dok je u upotrebi kako biste spriječili opekline korisnika i izazivanje požara paljenjem uređaja.
	Nemojte stajati na uređaju kako biste izbjegli oštećenje.
	Nemojte dodirivati upravljačku ploču mokrim rukama.
	Ne ostavljajte uređaj na otvorenom.
	Nemojte potapljati cijeli uređaj u vodu ili druge tekućine tijekom čišćenja.
	Ako se uređaj premjesti iz hladne prostorije na toplije mjesto, preporučuje se uključiti ga nakon 1 sata kako bi se izbjegao kvar zbog kondenzacije.
	Ne koristite ovaj uređaj u kombinaciji s drugim terapijskim uređajima.
	Ako uređaj koriste osobe koje nisu osjetljive na visoke temperature, cijelo vrijeme mora biti pod nadzorom osobe osjetljive na toplinu.
	Ovaj uređaj se ne smije koristiti u medicinske svrhe.
	Odmah prestanite koristiti uređaj ako se tijekom korištenja pojavi bilo kakva neuobičajena situacija (npr. dim ili neugodan miris).
	Molimo koristite samo napajanje s nazivnim naponom
	Prije uporabe uređaj provjerite, a ako se otkrije oštećenje, odmah ga popravite.

Nemojte koristiti ovaj uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli električni udar.

Ako imate bilo kakvih problema tijekom korištenja uređaja, odmah ga prestanite koristiti i posavjetujte se s liječnikom.

Nakon upotrebe isključite napajanje.





## ZABRANJENO

	Nemojte koristiti uređaj manje od pola sata nakon jela.
	Nemojte spavati dok koristite uređaj.
	Nemojte koristiti uređaj nakon što ste popili alkohol ili ako imate bilo kakve zdravstvene probleme.
	Nemojte koristiti benzin ili sprejeve s kaustikom za čišćenje.
	Nemojte postavljati uređaj blizu zapaljivih materijala.
	Nemojte pušiti dok koristite uređaj kako biste izbjegli opasnost od požara.

# NAZIV I NAMJENA SVAKOG DIJELA

## KONSTRUKCIJA

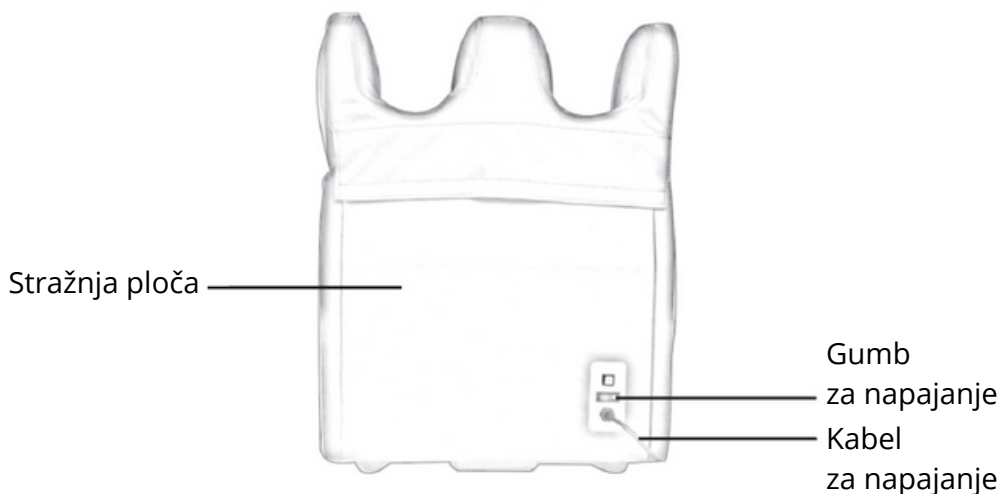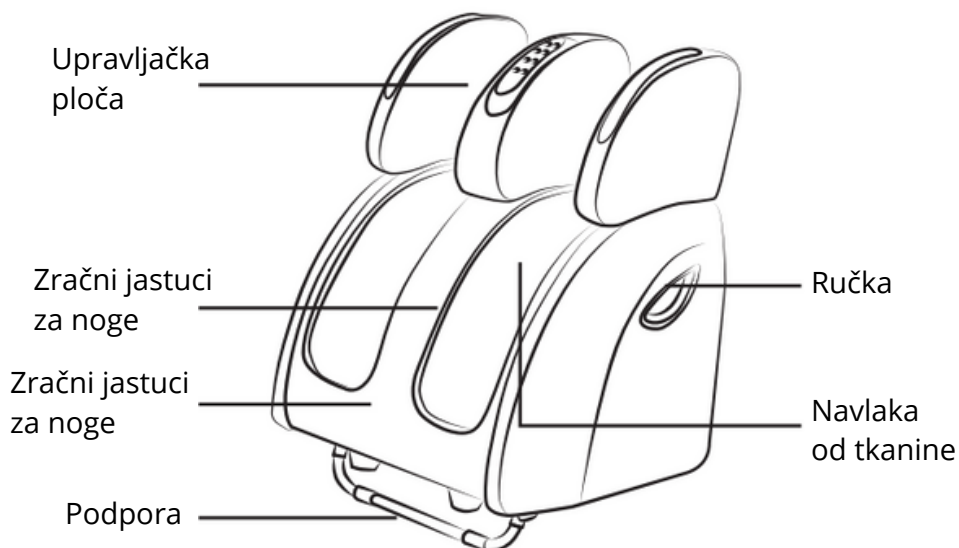

# NAZIV I NAMJENA SVAKOG DIJELA


## KONTROLNA PLOČA

Započnite s razinom intenziteta 2, koja se može promijeniti u razinu 1 ili razinu 3

Odabir programa masaže stopala

Odabir programa masaže za potkoljenice, koljena i bedra

Automatski program masaže

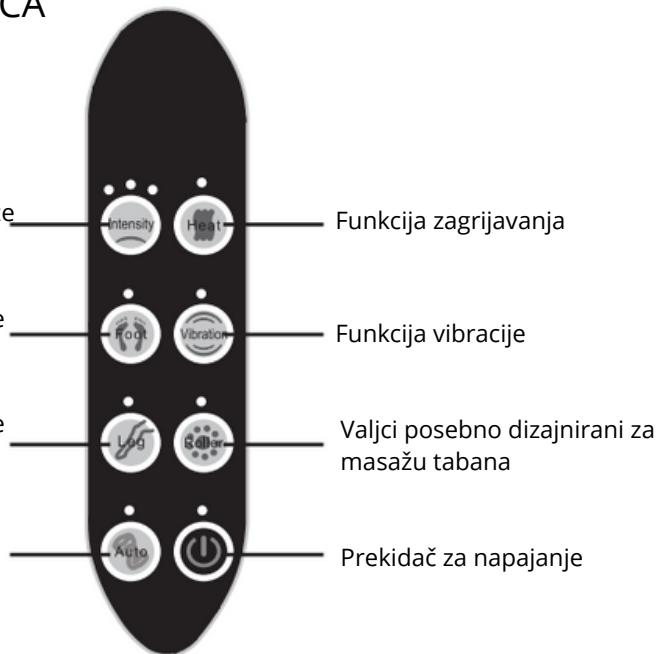

## INTENZITET



### UPOZORENJE

- ▶ Nemojte prolijevati vodu ili druge tekućine po upravljačkoj ploči.
- ▶ Ne držite tipku predugo kako ne biste prekinuli program.
- ▶ Ne koristite uređaj u uspravnom položaju i ne stavljajte na njega teške predmete.
- ▶ Nemojte stajati niti sjediti na uređaju.
- ▶ Prilikom transporta uređaja nemojte povlačiti kabel za napajanje. Ne povlačite uređaj izravno kako ga ne biste oštetili.

# NAZIV I NAMJENA SVAKOG DIJELA

## FUNKCIJE KONTROLNE PLOČE

Intenzitet (Intensity):

Pritisnite ovu tipku za prebacivanje između postavki srednjeg, visokog i niskog intenziteta.

Tipka za zagrijavanje:

Ako masažer radi, pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje funkcije grijanja.

Automatski način rada za masažu stopala (Foot):

Pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje automatskog načina rada za masažu stopala.

Vibracija:

Pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje funkcije vibracije.

Automatski način rada za masažu nogu:

Pritisnite ovaj gumb za uključivanje/isključivanje automatskog načina rada masaže potkoljenice, koljena i kukova.

Uključivanje/isključivanje: Pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje napajanja.

Masažni valjci (Roller):

Pritisnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje masažnih valjaka.

Auto:

Pritisnite ovaj gumb za uključivanje/isključivanje funkcije automatskog povezivanja (bez vibracija ili grijanja).

"Intenzitet:

Niski, srednji, visok."

Pažnja:

Srednji intenzitet je zadana postavka, pritisnite tipku za intenzitet. Odaberite željeni intenzitet prema svom ukusu.



**UPOZOR**  
**ENJE**

- ▶ Ako tijekom masaže nestane struje, isključite i izvucite utikač iz utičnice.
- ▶ Držite ruke i prste podalje od masažera ili prostora za noge tijekom rada
- ▶ Ne dopustite djeci ili kućnim ljubimcima da se igraju s uređajem kako biste izbjegli opasne situacije.

### Uklanjanje gornje navlake od tkanine

1. Raspakirajte i uklonite platnenu kutiju.
2. Očistite tkaninu.
3. Zamijenite gornju tkaninu kućišta (imajte na umu da je lijeva strana kućišta drugačija). Imajte na umu da se lijeva strana tkanine razlikuje od desne strane.)


### Uklanjanje donje navlake od tkanine.

1. Uklonite pokrivač pomoću vanjskih čičak traka.
2. Otkopčajte patentni zatvarač na pokrivaču.
3. Uklonite pokrivač.


### Montaža donjeg pokrivača od tkanine:

1. Spojite unutarnji čičak.
2. Zatvorite zatvarač.
3. Spojite vanjski čičak.

Patentni zatvarač

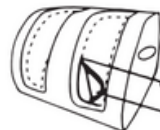

Patentni zatvarač  
Vanjski čičak

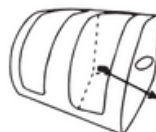

Unutarnji čičak

# KORISNIČKI PRIRUČNIK


## PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Pokretanje masažera:

- ▶ Čuvajte masažer na suhom mjestu daleko od sunčeve svjetlosti.
- ▶ Preporučamo da ispod postavite tepih ili meku prostirku kako biste smanjili buku tijekom uporabe.

Priključak:

- ▶ Spojite kabel za napajanje na masažer i utaknite ga u električnu utičnicu.
- ▶ Provjerite nije li kabel za napajanje oštećen.
- ▶ Prije početka rada okrenite donji nosač.
- ▶ Uključite prekidač za napajanje na rubu stražnjeg poklopca, indikator napajanja će se upaliti, masažer će se uključiti, a indikator na upravljačkoj ploči će treperiti.
- ▶ Pritisnite tipku za napajanje na upravljačkoj ploči kako biste pokrenuli masažer.
- ▶ Odaberite željeni program za početak masaže.

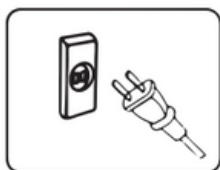

**UPOZORE  
NJE**

- ▶ Prije spajanja provjerite i uvjerite se da kabel za napajanje nije oštećen.
- ▶ Ne isključujte kabel za napajanje mokrim rukama kako biste izbjegli strujni udar.



Shema masažera 1



Shema masažera 2

## NAKON UPOTREBE

- ▶ Isključite gumb za napajanje na kontrolnoj ploči.
- ▶ Izvucite utikač iz utičnice.



# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## ODRŽAVANJE

### ČIŠĆENJE

- ▶ Prije čišćenja provjerite da kabel nije spojen u utičnicu.
- ▶ Za čišćenje površine proizvoda koristite meku krpu.



### UPOZORENJE

- ▶ Nikada ne spajajte niti izvlačite utikač iz električne utičnice mokrim rukama.
- ▶ Nemojte koristiti vodu za pranje niti prskati vodu ili druge tekućine po unutrašnjosti uređaja.
- ▶ Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje poput benzina ili razrjeđivača za čišćenje uređaja, inače će boja kućišta izbljediti, uređaj će popucati ili izbljediti.
- ▶ Ne glačajte presvlaku.
- ▶ Ako se uređaj smoči, nemojte skidati platnenu navlaku, već je ostavite da se osuši prirodnim putem.

## ODRŽAVANJE

- ▶ Provjerite je li struja isključena i utikač izvučen iz utičnice.
- ▶ Obrišite prašinu. Držite uređaj čistim i podalje od vlažnih mjesta.
- ▶ Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, prekrijte ga zaštitom od prašine (isporučuje se zasebno).



### UPOZORENJE

- ▶ Nemojte skladištiti proizvod na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili na mjestima s visokim temperaturama. To može uzrokovati bljeđenje boje kućišta.

## SAVJETI ZA KORIŠTENJE

Tijekom svakodnevne uporabe uređaja provjerite ima li sljedećih znakova oštećenja:

- ▶ Miris gorenog.
- ▶ Kada dodirnete kabel, napajanje se ponekad uključuje, a ponekad se isključuje.
- ▶ Kabel za napajanje postaje vruć.
- ▶ Druge nepravilnosti.



### UPOZORENJE

- ▶ Ako se pojavi bilo koja od gore navedenih abnormalnosti, prestanite koristiti kako biste izbjegli opasne situacije.
- ▶ Isključite struju i izvucite utikač iz utičnice, obratite se lokalnom prodavaču ili kontaktirajte nas.
- ▶ Nemojte sami rastavljati ili popravljati uređaj.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

№	Simptomi kvara	Mogući uzroci	Moguća rješenja
1	Pokretanje nije uspjelo	Kabel nije uključen u utičnicu.	Ponovno spojite utikač.
		Prekidač napajanja je isključen.	Uključite prekidač.
2	Masažer se ne uključuje i indikator napajanja je isključen.	Osigurač je pregorio.	Umetnite čačalicu ili sličan predmet u malu rupu s oznakom "FUSE" iznad prekidača za napajanje na dnu stražnje ploče, uklonite osigurač i zamijenite ga novim.
3	Tijekom korištenja čuje se buka.	Uređaj radi predugo.	Isključite struju i pričekajte sat vremena.
4	Vanjski panel je vruć.	Uređaj radi predugo.	Isključite masažer i pričekajte pola sata.

Ako se nakon provjere gore navedenih stavki pojave bilo kakve neuobičajene indikacije, obratite se svom lokalnom zastupniku za pomoć ovlaštenog servisera.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehnički parametri:

Naziv uređaja: Masažer za noge i stopala

Marka: WHALTIMA

Model: Bora-Bora

Nazivni napon: 220-240V~.

Nazivna frekvencija: 50/60Hz

Nazivna snaga: 40W

Proizvođač: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

Lokacija: Kina, br. 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Šangaj

Datum proizvodnje uređaja može se pronaći u serijskom broju koji se nalazi na identifikacijskoj naljepnici na kućištu proizvoda. Serijski broj sastoji se od 10 znamenki. Sedma i osma znamenka označavaju mjesec, a deveta i deseta znamenka - godinu proizvodnje uređaja.

PROIZVOĐAČ IMA PRAVO NA IZMJENE DIZAJNA, KONFIGURACIJE I KARAKTERISTIKA UREĐAJA U SKLOPU POBOLJŠANJA SVOJIH UREĐAJA.

PROMJENE TEHNIČKIH ASPEKATA SU TRAJNE.



W H A L T I M A