



W H A L T I M A

HUȘĂ DE SCAUN PENTRU MASAJ



MODEL FIJI

MANUALUL UTILIZATORULUI



Progresele în știință și tehnologie ne-au schimbat semnificativ viața, iar îngrijirea sănătății devine o mișcare în toată regula către un stil de viață sănătos.

Husa de masaj pentru scaun, oferind o relaxare maximă pentru gât, umeri, spate, talie și fese, oricând și oriunde. Forma sa în S imită perfect curbele corpului, iar poziția reglabilă a brațelor se potrivește utilizatorilor de diferite înălțimi. Designul oferă încălzire pentru gât, umeri și spate pentru a ajuta la obținerea unei relaxări și mai profunde. Masajul cu jet de aer relaxează, de asemenea, talia și fesele, reducând presiunea asupra coloanei vertebrale și întărind mușchii. Acest fotoliu de masaj elegant și stilat se potrivește perfect în orice fotoliu, pentru a se potrivi gustului dumneavoastră. O curea pentru spate este folosită pentru a fixa unitatea pentru a preveni deteriorarea acesteia.

Vă mulțumim că ați achiziționat acest aparat. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare pentru a asigura instalarea și funcționarea corectă a aparatului. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru consultări ulterioare.





CUPRINS

| | |
|--|---|
| Precauții | 1 |
| Denumirea și funcțiile tuturor componentelor | 3 |
| Design extern | 3 |
| Proiectare internă | 3 |
| Telecomandă de control | 4 |
| Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii | 5 |
| Instrucțiuni de utilizare | 7 |
| Manual de operare | 7 |
| Întreținere tehnică | 8 |
| Dacă în timpul utilizării întâlniți următoarele situații | 9 |
| Specificații tehnice | 9 |


PRECAUȚII

Informații importante privind siguranța:


- ▶ Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.
- ▶ Următoarele măsuri de precauție vor contribui la asigurarea funcționării corecte a acestui aparat. Tipurile de accidente potențiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sunt împărțite în două puncte: "AVERTISMENT" și "ATENȚIE".
- ▶ Citiți toate secțiunile marcate cu "AVERTISMENT" și "ATENȚIE" și urmați toate instrucțiunile din acest manual.

| | |
|---|---|
|  AVERTISMENT! | Operarea necorespunzătoare poate duce la rănirea utilizatorului. |
|  ATENȚIE! | Operarea necorespunzătoare poate duce la rănirea utilizatorilor sau la deteriorarea echipamentului. |
|  NU UTILIZAȚI! |  NU ÎNLOCUIȚI! |


Acest dispozitiv nu este potrivit pentru persoanele enumerate mai jos. Vă recomandăm să vă consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.

| | |
|--|---|
|  AVERTISMENT! | <p>Acest dispozitiv nu este potrivit pentru persoane:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ care au implanturi în corp.▶ Cu tumori maligne, boli acute, afecțiuni cardiace sau hipertensiune arterială severă.▶ Gravide.▶ Cu osteoporoză, deformări articulare sau traume recente.▶ Cu boli grave de piele sau leziuni cutanate.▶ Copiilor și persoanelor cu dizabilități li se permite utilizarea numai sub supraveghere atentă.▶ Acest aparat este echipat cu o funcție de încălzire. Vă rugăm să respectați măsurile de siguranță atunci când utilizați panoul de comandă. |
|--|---|

Măsuri de precauție pentru utilizarea panoului de comandă.


| | |
|--|---|
|  ATENȚIE! | <ul style="list-style-type: none">▶ Nu atingeți telecomanda cu mâinile umede și nu trageți de cablul telecomenzii.▶ Evitați contactul cu lichidele.▶ Nu așezați obiecte grele pe telecomandă. |
|--|---|

Condiții ideale de utilizare





| | |
|--|---|
|  ATENȚIE! | <ul style="list-style-type: none">▶ Nu utilizați acest aparat la temperaturi mai mari de 40°C.▶ Nu utilizați acest aparat într-un mediu umed sau prăfuit.▶ Scoateți aparatul din priză în timpul unei furtuni.▶ Nu utilizați aparatul în aer liber.▶ Așezați aparatul pe o suprafață plană și netedă.▶ Nu depozitați aparatul lângă surse de căldură, flăcări deschise sau în lumina directă a soarelui. |
|--|---|

PRECAUȚII

Avertismente privind prizele de alimentare și cablul de alimentare.


| | |
|---|---|
|  <p>ATENȚIE!</p> | <ul style="list-style-type: none">▶ Asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe plăcuța de identificare corespunde specificațiilor sursei dvs. de alimentare electrică.▶ Nu scoateți cablul de alimentare din priză cu mâinile umede pentru a evita șocurile electrice.▶ Nu trageți de cablu, prindeți capătul frontal din plastic pentru a-l deconecta.▶ Nu ciupiți cablul de curent alternativ cu un dispozitiv sau cu alte obiecte grele.▶ Nu deteriorați, nu îndoiți, nu trageți și nu răsuciți cablul de alimentare.▶ Utilizați numai un adaptor de alimentare adecvat, consultați furnizorul sau un specialist calificat pentru înlocuire.▶ Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l contactând producătorul, service-ul sau un specialist calificat pentru a evita pericolele. |
|---|---|

Recomandări pentru o utilizare sigură.


| | |
|---|---|
|  <p>ATENȚIE!</p> | <ul style="list-style-type: none">▶ Nu așezați obiecte grele pe aparat.▶ Nu utilizați alte dispozitive terapeutice simultan cu acest dispozitiv.▶ Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este descris în manualul de utilizare.▶ Aparatul trebuie utilizat numai de o singură persoană, nu-l utilizați de două sau mai multe persoane în același timp pentru a evita deteriorarea aparatului.▶ Aparatul este destinat numai utilizatorilor cu o greutate mai mică de 90 kg.▶ Nu utilizați aparatul imediat după masă, acest lucru poate provoca disconfort.▶ Dacă resimțiți disconfort în timpul utilizării aparatului, întrerupeți imediat utilizarea acestuia.▶ Nu se recomandă utilizarea aparatului mai mult de 15 minute.▶ Verificați tapițeria și alte componente, dacă există deteriorări, nu utilizați aparatul și contactați un profesionist calificat pentru a efectua lucrări de întreținere.▶ Mențineți o poziție corectă atunci când utilizați aparatul.▶ În cazul în care alimentarea este oprită în timpul utilizării, apăsați butonul de alimentare pentru a opri aparatul și evitați pericolele care pot apărea atunci când alimentarea este pornită din nou. |
|  <p>DANGER</p> | <ul style="list-style-type: none">▶ Nu folosiți aparatul dacă acesta are părți deteriorate/deschise.▶ Nu așezați sau așezați obiecte grele pe aparat.▶ Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul de masaj.▶ Nu adormiți în timp ce folosiți aparatul.▶ Evitați să utilizați aparatul atunci când sunteți intoxicat cu alcool.▶ Nu introduceți mâinile sau obiecte străine în deschiderile aparatului pentru a evita rănirea utilizatorului sau deteriorarea aparatului.▶ Dacă apare fum sau un miros neobișnuit în timpul funcționării aparatului, opriți imediat utilizarea aparatului. |
|  <p>NU DEZASTRUGEȚI</p> | <ul style="list-style-type: none">▶ Nu deșurubați aparatul pentru a evita deteriorarea acestuia.▶ Nu încercați să reparați sau să deșurubați aparatul fără o autorizație corespunzătoare. Contactați un distribuitor sau un agent de service autorizat. |
|  <p>DECONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE</p> | <p>Nu conectați niciodată aparatul la o priză și nu scoateți cablul de alimentare cu mâinile umede pentru a evita șocurile electrice sau rănille.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Deconectați cablul de alimentare de la prelungitor după utilizare.▶ Scoateți ștecherul din priză după ce ați oprit alimentarea cu energie electrică. |

DENUMIREA ȘI FUNCȚIILE TUTUROR COMPONENTELOR

Aspectul exterior

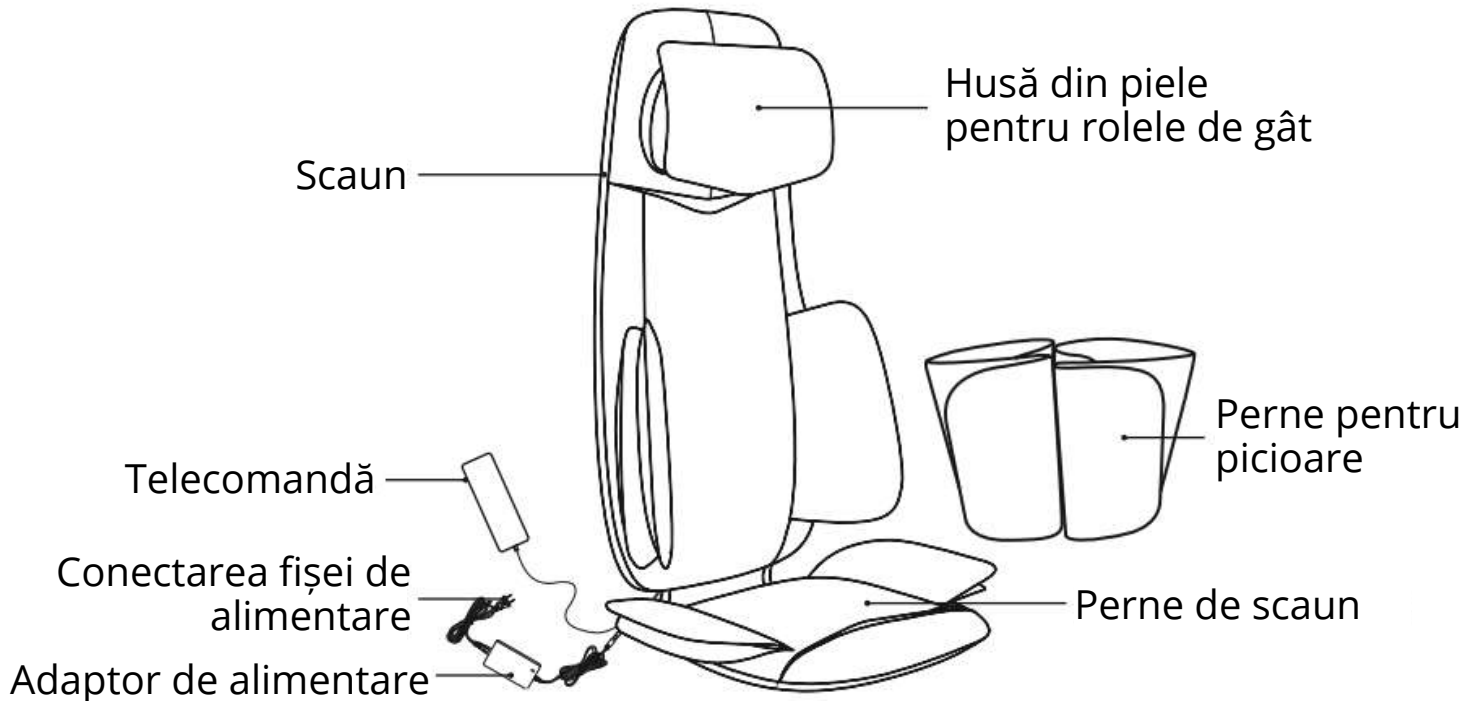

Structură internă

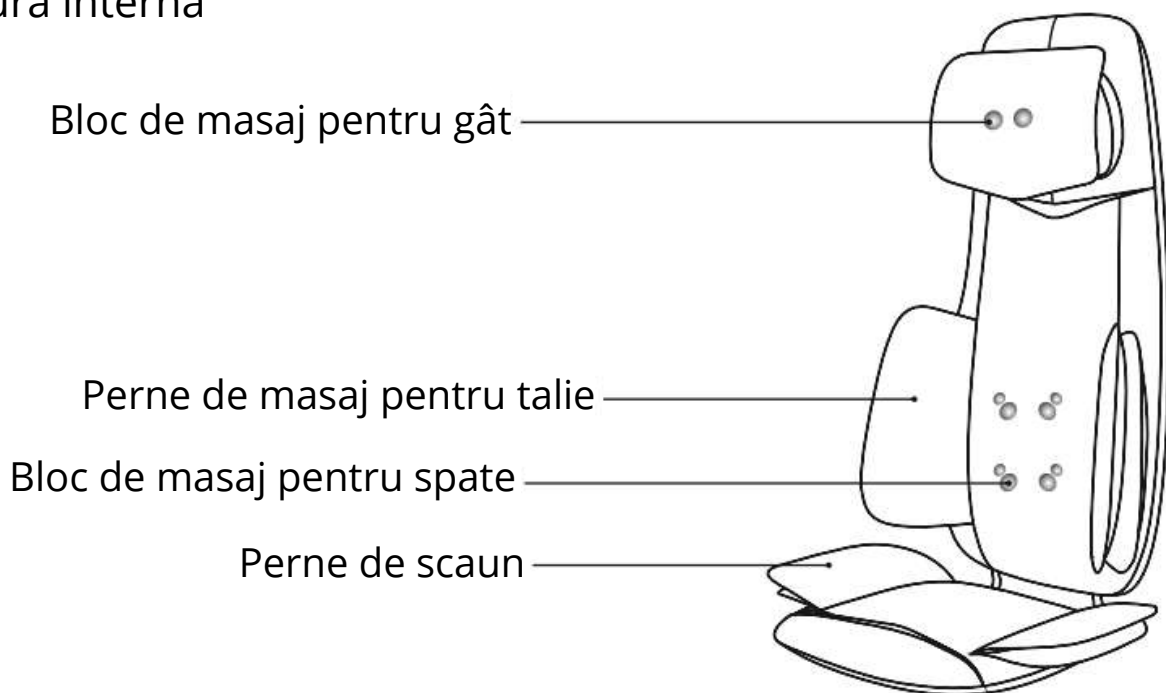

DENUMIREA ȘI FUNCȚIILE TUTUROR COMPONENTELOR

Telecomandă



Indicator de funcție

Masaj al gâtului cu relaxare înainte/înapoi

Ridicați mecanismul de masaj al gâtului în sus


Masaj automat

Masaj complet al spatelui

Masaj punctual pentru spate

Forța de masaj

Masaj cu aer

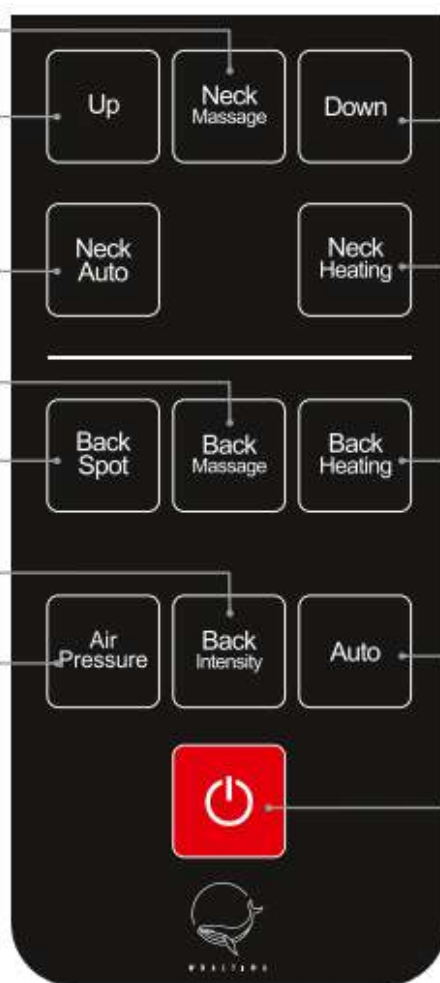

Masajul gâtului în jos

Încălzirea gâtului

Încălzirea spatelui

Mod automat

Pornire/oprire



ATENȚIE!

- ▶ Acest aparat de masaj este echipat cu o funcție de încălzire, acest lucru trebuie menționat pentru cei cu sensibilitate redusă la căldură.

DENUMIREA ȘI FUNCȚIILE TUTUROR COMPONENTELOR

Instrucțiuni de utilizare pentru telecomandă



Tasta de pornire/oprire:

Apăsați acest buton pentru a porni și a opri aparatul de masaj. Se va activa temporizatorul pentru 15 minute (indicatorul de alimentare se va aprinde). Apăsați din nou acest buton pentru a opri aparatul de masaj. Mecanismul de masaj va reveni la poziția inițială (indicatorul clipește și se stinge atunci când restabilirea poziției inițiale este completă).




Odată ce maseurul a pornit:

După pornirea maseurului, masajul gâtului va începe în sensul acelor de ceasornic în sensul acelor de ceasornic în modul implicit; apăsați acest buton pentru a comuta la modul de masaj în sens invers acelor de ceasornic; apăsați din nou pentru a de- butonul pentru a dezactiva masajul gâtului; funcția de încălzire a gâtului va fi dezactivată, dacă masajul de frecare a gâtului este întrerupt.



Tastă pentru ridicarea în sus a mecanismului de masaj al gâtului:

Apăsați și mențineți apăsat acest buton (indicatorul se aprinde continuu) pentru a ridica mecanismul de masaj al gâtului atunci când este conectat la sursa de alimentare; eliberați butonul, pentru a se opri (indicatorul se stinge); indicatorul pâlpâie atunci când mecanismul ajunge la poziția extremă.

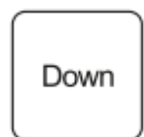

Cheia pentru a coborî mecanismul de masaj al gâtului:

Atunci când este conectat la sursa de alimentare, apăsați și mențineți apăsată această tastă (indicatorul se aprinde continuu) pentru a coborî mecanismul de masaj al gâtului; eliberați tasta pentru a-l opri (indicatorul se stinge); indicatorul clipește atunci când se atinge poziția extremă.




Buton de masaj automat al gâtului:

Dacă unitatea funcționează în modul de masaj al gâtului, apăsați acest buton pentru a porni / opri funcția automată de rulare completă a gâtului.



Butonul de încălzire a gâtului:

Apăsați acest buton atunci când efectuați un masaj al gâtului pentru a activa/dezactiva funcția de încălzire a gâtului.

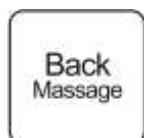

Când aparatul de masaj este pornit:

Când aparatul de masaj este pornit, începe implicit masajul complet al spatelui. Apăsați acest buton pentru a trece la masajul spatelui inferior, apăsați-l din nou pentru a trece la masajul spatelui superior și a treia oară pentru a opri masajul spatelui. Funcția de încălzire a spatelui va fi dezactivată dacă masajul spatelui este oprit.



Încălzirea înapoi pe buton:

După ce ați pornit aparatul de masaj pentru spate/masajul punctual al spatelui, apăsați acest buton pentru a porni/opri funcția de încălzire a spatelui.

DENUMIREA ȘI FUNCȚIILE TUTUROR COMPONENTELOR

Back
Spot

Buton de masaj pentru punctul din spate:

Prin apăsarea acestui buton, masajul se va concentra pe zona curentă de masaj. poziție, apăsând din nou va opri modul de masaj punctual. În plus, butonul de încălzire a spatelui poate fi apăsat pentru a activa încălzirea.

Air
Pressure

Buton de masaj cu aer:

Atunci când este conectat la o sursă de alimentare, apăsarea acestui buton va activa masajul cu aer. Atunci când pernele pentru picioare sunt atașate la aparatul de masaj, modul de masaj cu aer lombar este setarea implicită (indicatorul de corp aprins în mod constant); apăsarea acestui buton va comuta modul pe masaj cu aer pentru picioare (indicatorul pentru picioare este aprins în mod constant). Apăsând din nou acest buton, se va comuta la modul de masaj cu aer complet: (lombar + picioare). Apăsarea acestei taste a treia oară va dezactiva toate funcțiile de masaj cu aer (indicatorul Air Massage se aprinde permanent). (indicatorul de masaj cu aer se stinge). În cazul în care pernele pentru picioare nu sunt atașate la aparatul de masaj, modul de masaj cu aer lombar este setarea implicită (indicatorul de corp constant este aprins, iar indicatorul de masaj cu aer clipește); apăsarea acestui buton va comuta la modul de masaj cu aer de intensitate medie (indicatorul corpului se aprinde în permanență și indicatorul de masaj cu aer clipește rapid); apăsarea acestui buton a treia oară va dezactiva funcția de masaj cu aer (indicatorul de masaj cu aer indicatorul de masaj cu aer se va stinge).

Back
Intensity

Butonul de intensitate a încălzirii din spate:

Atunci când efectuați un masaj al spatelui/masaj punctual al spatelui, intensitatea medie este setarea implicită. Prin apăsarea acestui buton se trece la intensitate ridicată, iar prin apăsarea din nou a butonului se trece la intensitate scăzută.

Auto

Butonul pentru modul automat:

Atunci când este conectat la o sursă de alimentare, apăsarea acestui buton va activa/dezactiva modul automat de masaj. Când modul de masaj automat este activat, puteți apăsa un alt buton pentru a ieși din modul automat și a vă regla propriul mod de masaj.




ATENȚIE!

- ▶ Nu atingeți telecomanda cu mâinile umede pentru a evita șocurile electrice sau deteriorarea telecomenzii.
- ▶ Pentru a evita funcționarea defectuoasă, asigurați-vă că pe telecomandă nu intră apă sau alte lichide.

MANUALUL UTILIZATORULUI

Manual de utilizare

- ▶ Verificați dacă aparatul este deteriorat înainte de utilizare.
- ▶ Așezați dispozitivul pe o suprafață plană (de exemplu, canapea sau fotoliu), fixați-l cu cureaua de pe spate.
- ▶ Conectați fișa de alimentare la unitatea de alimentare și întrerupătorul de alimentare la o priză electrică (100-240 V) (a se vedea imaginea de mai jos).
- ▶ Apăsați butonul de pornire pentru a porni scaunul de masaj, cu condiția ca acesta să fie conectat la o sursă de alimentare.
- ▶ Scoateți întotdeauna scaunul de masaj din priză imediat după utilizare.

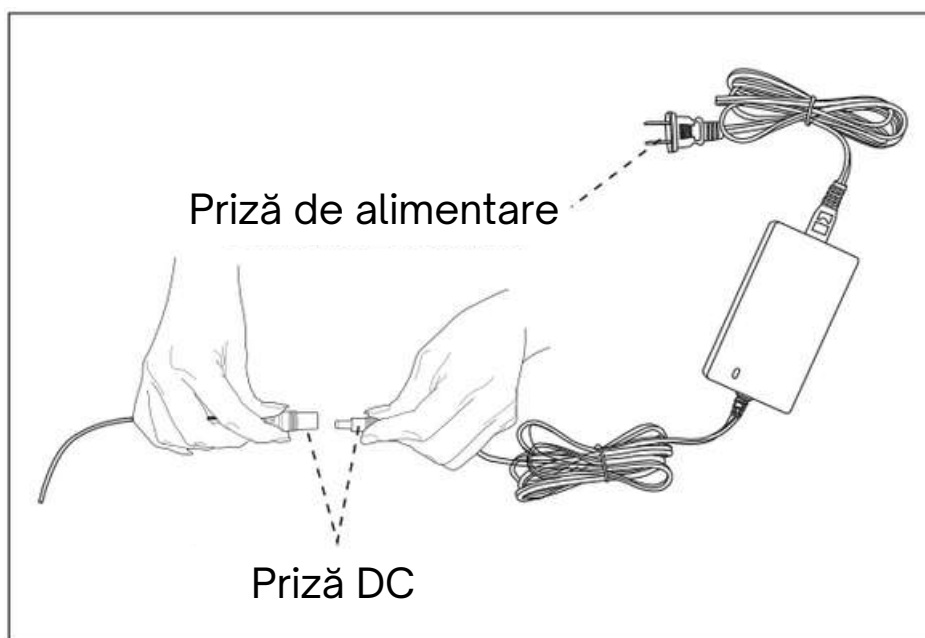

ATENȚIE!

- ▶ În mod implicit, unitatea funcționează timp de 15 minute, după care se oprește automat. Apăsați butonul de alimentare pentru a reporni aparatul.
- ▶ În timpul utilizării, spatele scaunului de masaj trebuie să rămână în poziție verticală, nu utilizați aparatul în poziție culcată.
- ▶ Nu vă așezați picioarele pe aparat.
- ▶ Nu transportați acest aparat de cablul de alimentare și nu folosiți cablul pe post de mâner pentru a nu-l deteriora.
- ▶ Opriți alimentarea și depozitați aparatul de masaj atunci când nu îl utilizați pentru a evita deteriorarea acestuia.
- ▶ Opriți alimentarea și puneți aparatul de masaj deoparte atunci când nu îl folosiți, pentru a nu fi pornit accidental de către copii.

SERVICE

Instrucțiuni de utilizare

Curățarea:

- ▶ Înainte de curățare, asigurați-vă că ați oprit alimentarea cu energie electrică și că ați deconectat cablul de alimentare de la priză.
- ▶ Folosiți o cârpă moale pentru a curăța suprafața produsului.
- ▶ Pentru a îndepărta petele, ștergeți cu o cârpă moale înmuiată în apă sau cu un detergent ușor cu pH neutru, apoi ștergeți cu o altă cârpă.



ATENȚIE!

- ▶ Nu conectați sau deconectați niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude.
- ▶ Evitați contactul cu lichidele.
- ▶ Nu folosiți benzină, diluanți sau alți solvenți pentru a curăța aparatul.
- ▶ Nu încercați să dezamblați singur aparatul când este ud, lăsați-l să se usuce la aer.

Metode de depozitare:

- ▶ Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de a depozita aparatul.
- ▶ Depozitați aparatul într-un mediu lipsit de umiditate și gaze volatile și nu îl depozitați la temperaturi ridicate.
- ▶ Dacă unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să o împachetați într-o cutie pentru a o proteja de praf.



ATENȚIE!

- ▶ Nu lăsați aparatul direct la soare pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate cauza decolorarea sau deteriorarea.

Sfaturi privind funcționarea sistemului de încălzire

Odată cu utilizarea zilnică, verificați dacă aparatul prezintă următoarele semne:

- ▶ miros de arsură;
- ▶ intermitență a puterii când atingeți cablul de încălzire;
- ▶ cablu de alimentare fierbinte;
- ▶ cablu de alimentare deteriorat;
- ▶ alte simptome anormale.



ATENȚIE!

- ▶ Vă rugăm să întrerupeți utilizarea aparatului pentru a evita deteriorarea sau accidentele dacă observați oricare dintre simptomele de mai sus.
- ▶ Opiți alimentarea cu ajutorul butonului și scoateți ștecherul din priză, apoi contactați distribuitorii sau furnizorul local pentru reparații.
- ▶ Nu încercați să reparați sau să dezamblați singur aparatul.

Dacă în timpul utilizării întâlniți următoarele situații

| Nr | Simptomele defecțiunii | Cauze posibile | Soluții posibile |
|----|---|---|---|
| 1 | Se aude un zgomot în timpul utilizării. | Acest sunet este normal, este cauzat de frecarea aparatului de masaj cu învelișul din țesătură. | Nu este necesară nicio acțiune. |
| 2 | Scaunul de masaj nu pornește. | Adaptorul de alimentare este conectat incorect. | Conectați corect adaptorul de alimentare. |
| | | Înterupătorul de alimentare este în poziția oprit. | Porniți înterupătorul de alimentare. |
| | | Cablul de alimentare nu este conectat la priză. | Conectați dispozitivul la o priză. |

Dacă problema persistă, contactați dealerul pentru service la numărul de telefon menționat în contractul de achiziție.

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Denumirea dispozitivului: Scaun de masaj

Marca: WHALTIMA.

Model: FJI

Tensiune nominală: 210-230 V

Tensiune de intrare: 12 V

Frecvență: 50 Hz

Putere nominală: 60 W

Clasa de protecție (IP): IP5

Fabricat în China

Producător: SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED. Siedziba: China, No. 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Shanghai (China, Nr 1226, Zhufeng Road, Qingqu, Shanghai.

Nu aruncați acest manual.

Este posibil ca aspectul produsului să nu corespundă reprezentării. Acest manual a fost supus unei editări și verificări atente, dar acest lucru nu exclude posibilitatea unor erori în timpul creării și tipăririi. Ne cerem scuze în avans pentru orice neînțelegeri. Dreptul de interpretare finală aparține companiei. Acest manual este o traducere literală și reflectă informațiile furnizate de producător.



Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător.



W H A L T I M A