


KORISNIČKI PRIRUČNIK



W H A L I M A

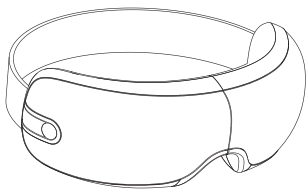

MASAŽER ZA OČI

SIGURNOSNE MJERE.....	1
NAZIV I FUNKCIJA SVAKOG DIJELA.....	3
Struktura.....	3
Upravljački gumbi.....	4
UPUTE ZA UPOTREBU.....	5
PUNJENJE.....	6
SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA.....	7
MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU PROIZVODA.....	8
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	9
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.....	10

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik prije upotrebe kako biste osigurali ispravno funkcioniranje.

Molimo vas da ovaj KORISNIČKI PRIRUČNIK čuvate na odgovarajućem mjestu za buduću referencu.




Važne sigurnosne upute

- Potrebna je bliska nadzor prilikom korištenja ovog proizvoda od strane djece, nvalida ili osoba s invaliditetom.
- Ako osjetite bilo kakvu neugodnost tijekom korištenja ovog proizvoda, odmah prekinite upotrebu.
- Ne koristite proizvod ako je punjač ili kabel za napajanje oštećen.
- Pri punjenju uređaja, pobrinite se da je priključak za punjenje suh.
- Ne koristite ili ne puniti uređaj kada je prisutna vlaga ili moguća vlaga.
- Ne koristite druge terapijske uređaje zajedno s ovim proizvodom.
- Koristite ovaj proizvod samo u svrhu za koju je namijenjen prema uputama u ovom priručniku.
- Izbjegavajte upotrebu proizvoda pod utjecajem alkohola.
- Nije preporučljivo koristiti uređaj duže od 15 minuta.
- Ne nosite ovaj proizvod za napajanje ili koristite kabel kao ručku kako biste izbjegli oštećenja.
- Osobe koje pate od bolesti oka ili su imale operacije oka ne bi trebale koristiti proizvod bez konzultacije s liječnikom.
- Osobe s ozbiljnim ili ozlijeđenim stanjima kože oko oka ne bi trebale koristiti ovaj proizvod.
- Osobe s pejsmejkerom ili elektroničkim uređajima ugrađenim u tijelo ne bi smjele koristiti ovaj proizvod.
- Osobe s malignim tumorima, hipertenzijom ili srčanim bolestima trebaju biti pod nadzorom prilikom korištenja ovog proizvoda (Potrebno je nadzirati).
- Ovaj masažer ima funkciju grijanja, osobe s umanjenim osjetom topline trebaju obratiti pažnju.

Važne sigurnosne upute

- Osobama koje pate od visoke temperature se ne preporučuje korištenje masažera.
- Nagnite glavu unatrag tijekom korištenja radi boljih učinaka masaže.
- Ne rastavljajte ovaj proizvod sami kako biste izbjegli kvar proizvoda.
- Ne pokušavajte popravljati ili rastavljati uređaj bez dopuštenja.
- Molimo kontaktirajte ovlaštenog prodavatelja ili servisnog agenta za popravak.
- Puniti masažer samo unutar navedenog napona.
- Ne vucite kabel, dosegnite prednji plastični dio kako biste ga isključili.
- Nemojte oštetiti, prekomjerno saviti, jako vući ili uvijati kabel za napajanje..
- Ako je USB napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Molimo koristite odgovarajući adapter (5V1A) i napojni kabel za punjenje.


Struktura

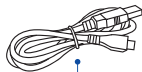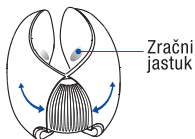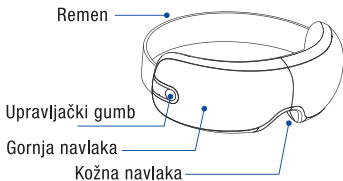

Kabel za punjenje tip-C

Ime	Kesa	Kabel za punjenje tip-C	PE kesa	Korisnički priručnik
Kvantiteta	1	1	× 2	1

Kontrolni gumbi

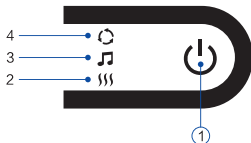

- ① Gumb za napajanje/
način rada
- ② Indikatorsko svjetlo
za način rada – Grijanje
- ③ Indikatorsko svjetlo
za način rada – Glazba
- ④ Indikatorsko svjetlo
za način rada – Magija

**OPREZ**

Aparat se automatski postavlja na rad od 15 minuta i automatski se zaustavlja kada istekne vrijeme. Pritisnite gumb za napajanje/način rada za ponovno pokretanje.

Kako koristiti



Gumb za napajanje/ način rada

- 1 – Pritisnite i držite ovaj gumb za uključivanje, Magični način pokazivača svjetli, zrak Pritiska+Vibracija+Grijanje+Glazba.
- 2 – Kratko pritisnite ovaj gumb za prebacivanje na način glazbe, pokazivač načina glazbe svijetli, zrak Pritiska+Vibracija+Glazba.
- 3 – Kratko pritisnite ovaj gumb ponovno za prebacivanje na način grijanja, pokazivač načina grijanja svijetli, zrak Pritiska+Vibracija+Grijanje.
- 4 – Dvaput dodirnite gumb za napajanje kako biste isključili zvuk umirujuće glazbe.

Bluetooth Veza

- ▶ Povezivanje prvi put: uključite Bluetooth na svom mobilnom uređaju za uparivanje, "Bluetooth povezan" će se čuti kada uparivanje uspije; ako je Bluetooth veza prekinuta, također će biti zvučnih upozorenja.
- ▶ Nakon prvog uparivanja masažera, nema potrebe ponovno uparivati za ponovno povezivanje.

Način Nošenja

Prislonite šalice za oči na lice i postavite ih na mjesto, povucite elastičnu traku preko glave i prilagodite je na odgovarajuću duljinu.




OPREZ

Nemojte pokretati proizvod bez opterećenja kako biste izbjegli oštećenje zračnih jastuka. Uklonite bilo kakve dodatke za glavu i kontaktne leće prije upotrebe ovog uređaja.

Punjenje baterije

- Umetnite priključak adaptera u konektor tipa C na proizvodu (vidi sliku ispod).
- Umetnite napajanje adaptera u zidnu utičnicu (100-240V~, 50/60 HZ).
- Pokazivač načina glazbe svijetli u postojećoj crvenoj boji kada se poveže na napajanje za punjenje.
- Pokazivač se stabilno zeleni kada je punjenje završeno. Potpuno punjenje će trajati 3-5 sati.

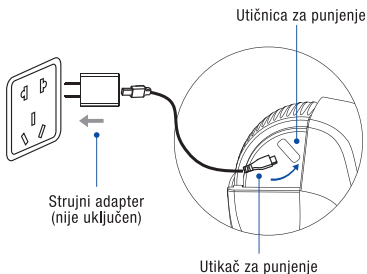

OPREZ

- Uređaj ne radi tijekom punjenja.
- Molimo koristite odgovarajući adapter (5V1A) i napajni kabel za punjenje.
- Ne stišćite napajni kabel kako biste izbjegli oštećenje.

Njega i Održavanje

- Koristite mekanu krpu za čišćenje površine proizvoda.
- Očistite mrlje s kožnog presvlaka vlažnom krpom namočenom u vodu.



OPREZ

Nemojte koristiti medicinski alkohol ili druge korozivne tekućine za čišćenje proizvoda. Molimo pošaljite svoj masažer u ovlašteni servisni centar na servisiranje. Nemojte pokušavati sami rastavljati ili popravljati proizvod.

Skladištenje

- Kada proizvod nije u upotrebi tijekom duljeg vremenskog razdoblja, preporučujemo da ga držite u kutiji kako biste ga zaštitili od prašine.
- Ne stavlajte teške predmete na proizvod i držite ga podalje od vlage.





OPREZ

Molimo držite proizvod podalje od zagrijanih površina kako biste spriječili opasnost od požara ili oštećenje proizvoda.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s masažerom.

Molimo pomozite promovirati recikliranje baterija.

 OPASNOST	<p>Ovaj proizvod sadrži određenu punjivu bateriju, nemojte je uklanjati s proizvoda radi punjenja ili koristiti je na drugim proizvodima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte je izlagati otvorenom plamenu kako biste izbjegli pregrijavanje. ▶ Molimo pravilno rukujte proizvodom kako biste izbjegli oštećenje. ▶ Nemojte izravno povezivati dva terminala baterije s provodnim metalom. ▶ Nemojte pohranjivati ovaj proizvod s ogrlicom ili ukosnicama za kosu i ostalim nakitom. <p>Nemojte puniti, koristiti ili pohranjivati proizvod blizu topline, otvorenog plamena ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti. To može uzrokovati pregrijavanje, požar ili pucanje proizvoda.</p>
 UPOZORENJE	<p>Držite uklonjenu bateriju dalje od malene djece kako biste spriječili ozljede.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvedite dijete odmah u bolnicu ako je progutalo bateriju. ▶ Ako dođe do curenja iz baterije, izbjegavajte dodirivanje gola kože kako biste spriječili kemijske opekline. ▶ Ako dodete u dodir s curenjem baterije, temeljito isperite kožu vodom. Izloženost kože zahtijeva temeljito ispiranje i posjet liječniku. ▶ Rastavljajte uređaj jedino zbog odlaganja, molimo kontaktirajte ovlaštenog prodavatelja ili servisnog agenta za servisiranje.

Baterije se mogu reciklirati nakon upotrebe, molimo reciklirajte litij-ionske baterije putem lokalnih programa.

Uklonite baterije iz uređaja prije odlaganja uređaja.

Isključite napajanje prije uklanjanja baterija.

Pravilno zbrinite baterije.

Koraci Uklanjanja Baterije



Koristite ravnokraki odvijač nježno podignite vanjski kožni pokrov.



Odvrnite vijke i uklonite plastični pokrov.



Odrežite kabele baterije i uklonite bateriju.

Simptomi	Mogući Uzroci	Moguća Rješenja
Uređaj se ne pokreće	Prekidač za pokretanje je ugašen	Uključite prekidač a pokretanje
	Prazna baterija	Napunite bateriju
	Zadani mjerač vremena je istekao	Pritisnite gumb za uključivanje kako biste ponovno pokrenuli masažer
Uređaj se ne puni	Utikač nije dobro priključen	Ponovno spojite utikač
Indikatorsko svjetlo se priguši ili treperi	Slaba baterija	Molimo Vas da napunite bateriju
Nizak tlak zraka		

- Ako se problem nastavi, molimo isključite napajanje i kontaktirajte ovlaštenog prodavatelja radi održavanja.

Naziv: Masažer za oči
Model: Aniq
Nzivni napon: 5V
Nazivna snaga: 5W
Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
Konstruktivna sigurnost: III

Proizvođač:
SHANGHAI AIRONGDA FITNESS TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresa:
China, No. 1226 Zhufeng Road, Qingqu, Shanghai.
Proizvedeno u Kini.

